


Kit Chirurgico MITO

MITO Surgical Kit



- 1 Prolunga per frese | Drill extension
TPRFRV2
- 2 Fresa lanceolata iniziale | Initial lanceolate drill
TFRLAN
- 3 Cacciavite manuale lungo es. 1,28 | Long manual driver hex 1,28
TDR128L
- 4 Cacciavite manuale corto es. 1,28 | Short manual driver hex 1,28
TDR128C
- 5 Cacciavite lungo per cricchetto e manuale 1,28
Long hand/ratchet driver hex. 1,28
TCR128L
- 6 Cacciavite lungo per contrangolo 1,28
Long contra-angle driver hex. 1,28
TCO128L
- 7 Driver per contrangolo per impianti Mito
Contra-angle driver for Mito implants
MITOINS
- 8 Driver per cricchetto per impianti Mito
Ratchet driver for Mito implants
MITODR
- 9 Indicatori di parallelismo | Parallelism pin
TIND
- 10 Driver corto per cricchetto per impianto Ø 3,4
Short ratchet connection driver for Ø 3,4 implant
ILDRC
- 11 Driver lungo per contrangolo per impianto Ø 3,4
Long contra-angle driver connection driver for Ø 3,4 implant
ILINSL
- 12 Fresa | Drill Ø 2,0
TFRC20
- 13 Frese | Drills Ø 3,40 - 3,75 - 4,20 - 5,00
ILFR34 - MITOFR37 - MITOFR42 - MITOFR50
- 14 Frese per la corticale Ø 3,40 - 3,75 - 4,20 - 5,00
ILFRC34 - MITOFR37 - MITOFR42 - MITOFR50
- 15 Stop fresa | Drill stop Ø 2,0
TSTOPC2006 - TSTOPC2080 - TSTOPC2010
TSTOPC2011 - TSTOPC2013 - TSTOPC2015
- 16 Stop fresa | Drill stop Ø 3,40
TSTOPC2806 - TSKSTOP3585 - TSKSTOP3510
TSKSTOP3511 - TSKSTOP3513 - TSKSTOP3515
- 17 Stop fresa | Drill stop Ø 3,75
MITOSTOP3706 - MITOSTOP3780 - MITOSTOP3710
MITOSTOP3711 - MITOSTOP3713 - MITOSTOP3715
- 18 Stop fresa | Drill stop Ø 4,20
MITOSTOP4206 - MITOSTOP4280 - MITOSTOP4210
MITOSTOP4211 - MITOSTOP4213 - MITOSTOP4215
- 19 Stop fresa | Drill stop Ø 5,00
MITOSTOP5006 - MITOSTOP5080 - MITOSTOP5010
MITOSTOP5011 - MITOSTOP5013 - MITOSTOP5015
- 20 Misuratore di profondità | Depth gauge
TMPRF
- 21 Cricchetto dinamometrico 15-80 N°cm
Torque ratchet 15-80 N°cm
TDINA

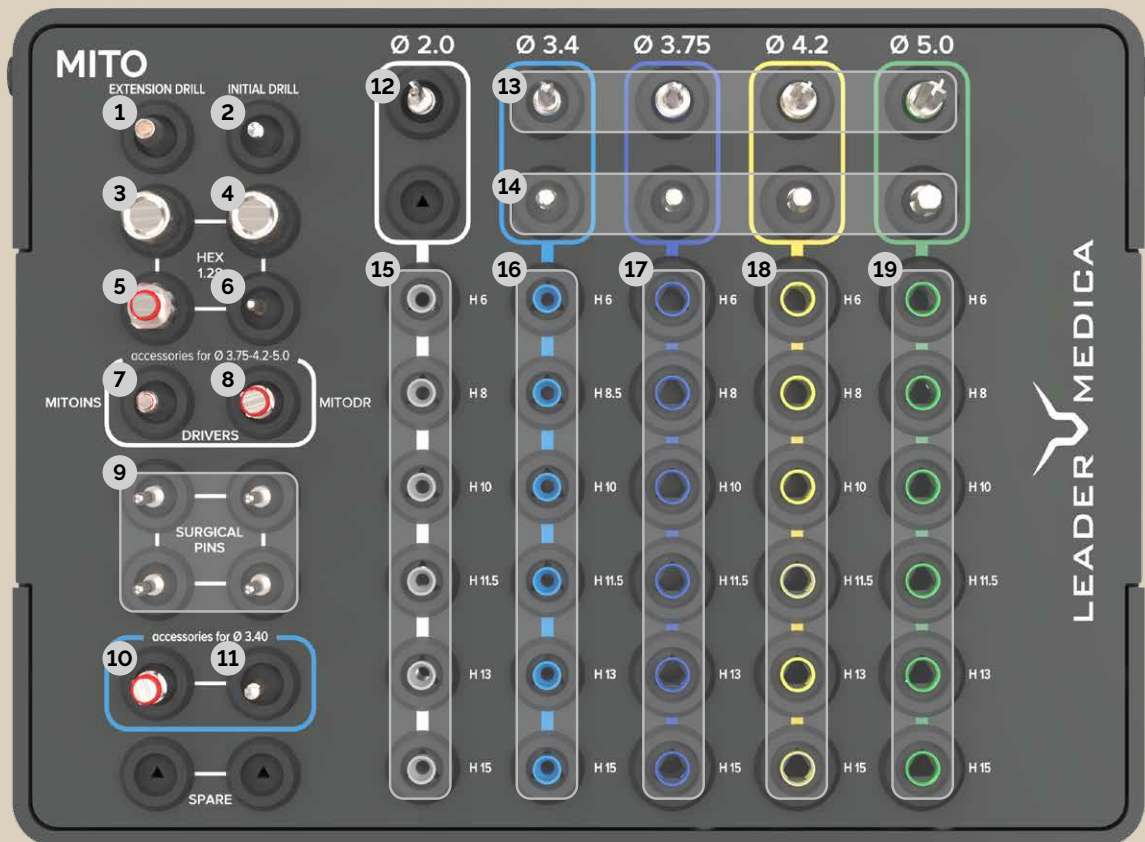

Protocollo chirurgico MITO *Surgical Protocol*

SEQUENZA DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO IMPLANT INSERTION SEQUENCE

A titolo di rappresentazione esemplificativa, si riporta di seguito la sequenza chirurgica da adottare per un impianto con le seguenti caratteristiche:

Ø 5,00 mm, H 10 mm - STOP UTILIZZATO PER L'IMPIANTO H 10 mm

For illustrative purposes, the surgical sequence for an implant with the following characteristics is shown below:

Ø 5.00 mm, H 10 mm - STOP USED FOR THE 10 mm HIGH IMPLANT.

	PRIMA FRESA FIRST DRILL	SECONDA FRESA SECOND DRILL	TERZA FRESA THIRD DRILL	QUARTA FRESA FOUR DRILL	QUINTA FRESA FIFTH DRILL	FRESA FINALE FINAL DRILL
Ø EFFETTIVO FRESA ACTUAL DRILL	LANCEOLATA LANCEOLATE	2,0	2,8	3,3	3,6	4,4
Ø IMPIANTO IMPLANT	-	-	3,4	3,75	4,2	5,0



(Fig. 1) Inserimento impianto | Implant insertion

AFFONDAMENTO DELL'IMPIANTO A LIVELLO CRESTALE BONE LEVEL


Ai fini del corretto inserimento, è essenziale verificare il posizionamento a livello crestale Bone Level dell'impianto, in linea con la cresta ossea (Fig. 1).

PLACEMENT OF THE SYSTEM AT CRESTAL LEVEL BONE LEVEL

For correct insertion, it is essential to check the crestal Bone Level positioning of the implant, in line with the bone crest (Fig. 1).

TABELLA RIASSUNTIVA DIAMETRO E LUNGHEZZA PUNTA FRESA SUMMARY TABLE DRILL DIAMETER AND LENGTH	
DIAMETRO IMPIANTO ASSOCIATO ALLA FRESA IMPLANT DIAMETER ASSOCIATED WITH EACH DRILL (mm)	LUNGHEZZA PUNTA FRESA LENGTH OF DRILL TIP (mm)
Ø 3,4	0,27
Ø 3,75	0,33
Ø 4,2	0,38
Ø 5,0	0,53

AL FINE DI DETERMINARE ESATTAMENTE LA PROFONDITÀ DI FRESAGGIO, SI RACCOMANDA DI CONSIDERARE LA LUNGHEZZA DELLA PUNTA DELLA FRESA, CHE VARIA PER OGNI DIAMETRO DI FRESA. (Fig. 2)

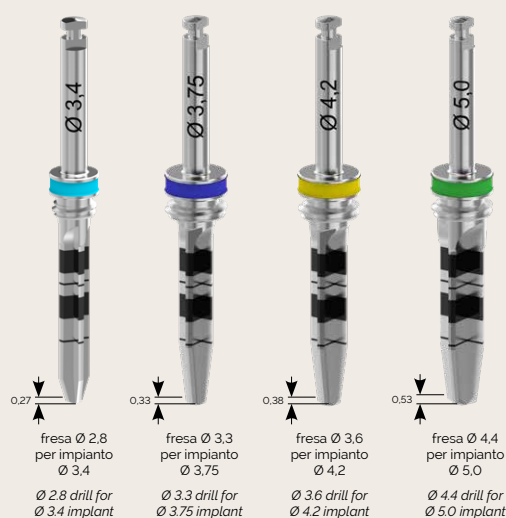

(Fig. 2) Lunghezza punte frese | Length of drill tips

IN ORDER TO DETERMINE THE EXACT MILLING DEPTH, IT IS RECOMMENDED TO CONSIDER THE LENGTH OF THE DRILL TIP, WHICH VARIES FOR EACH DRILL DIAMETER. (Fig. 2)