


SINTESI DEL PROCESSO PRODUTTIVO

SUMMARY OF THE PRODUCTION PROCESS

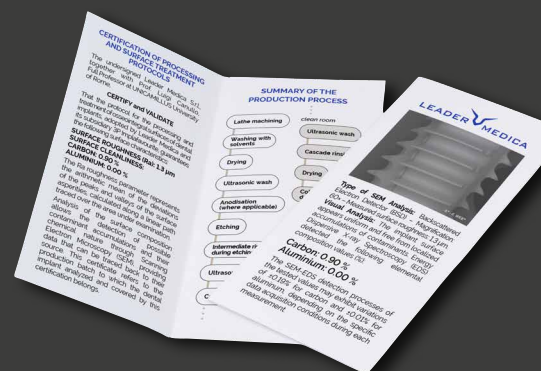

01

LAVORAZIONI AL TORNO
Lathe machining

02

LAVAGGIO CON SOLVENTI
Washing with solvents

03

ESSICCAZIONE
Drying

04

LAVAGGIO A ULTRASUONI
Ultrasonic wash

05

ANODIZZAZIONE (OVE PREVISTO)
Anodisation (where applicable)

06

MORDENZATURA
Etching

07

RISCIACQUI INTERMEDI ALLA MORDENZATURA
Intermediate rinsing during etching

08

LAVAGGIO A ULTRASUONI
Ultrasonic wash

09

LAVAGGIO A CASCATA
Cascade washing

CAMERA BIANCA | CLEAN ROOM

10

LAVAGGIO A ULTRASUONI
Ultrasonic wash

11

RISCIACQUO A CASCATA
Cascade rinsing

12

ESSICCAZIONE
Drying

13

DECONTAMINAZIONE AL PLASMA A FREDDO
Cold plasma decontamination

14

INFIALAGGIO SOTTO CAPPA A FLUSSO LAMINARE
Filling under laminar flow hood

15

INSERIMENTO IN BLISTER
Blister packing

16

CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA
Packing and labelling

17

STERILIZZAZIONE A RAGGI BETA
Sterilisation by beta (β) rays

18

CONTROLLO DI QUALITÀ AL SEM
Quality Control at SEM