


# SINTESI DEL PROCESSO PRODUTTIVO

## SUMMARY OF THE PRODUCTION PROCESS

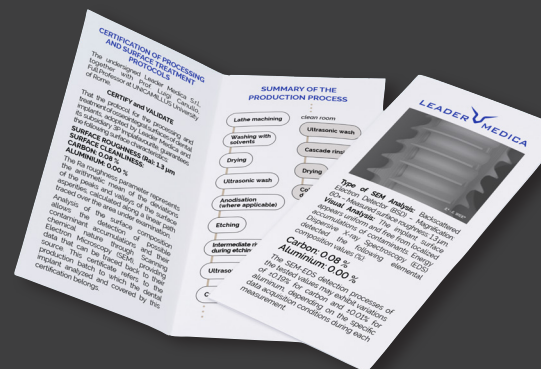

01

LAVORAZIONI AL TORNO

Lathe machining

02

LAVAGGIO CON SOLVENTI

Washing with solvents

03

ESSICCAZIONE

Drying

04

LAVAGGIO A ULTRASUONI

Ultrasonic wash

05

ANODIZZAZIONE (OVE PREVISTO)

Anodisation (where applicable)

06

MORDENZATURA

Etching

07

RISCIACQUI INTERMEDI ALLA MORDENZATURA

Intermediate rinsing during etching

08

LAVAGGIO A ULTRASUONI

Ultrasonic wash

09

LAVAGGIO A CASCATA

Cascade washing

### CAMERA BIANCA | CLEAN ROOM

10

LAVAGGIO A ULTRASUONI

Ultrasonic wash

11

RISCIACQUO A CASCATA

Cascade rinsing

12

ESSICCAZIONE

Drying

13

DECONTAMINAZIONE AL PLASMA A FREDDO

Cold plasma decontamination

14

INFIALAGGIO SOTTO CAPPA A FLUSSO LAMINARE

Filling under laminar flow hood

15

INSERIMENTO IN BLISTER

Blister packing

16

CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA

Packing and labelling

17

STERILIZZAZIONE A RAGGI BETA

Sterilisation by beta ( $\beta$ ) rays

18

CONTROLLO DI QUALITÀ AL SEM

Quality Control at SEM